


VDW.GOLD®

Multifunktionaler Endomotor
mit integriertem Apexlocator

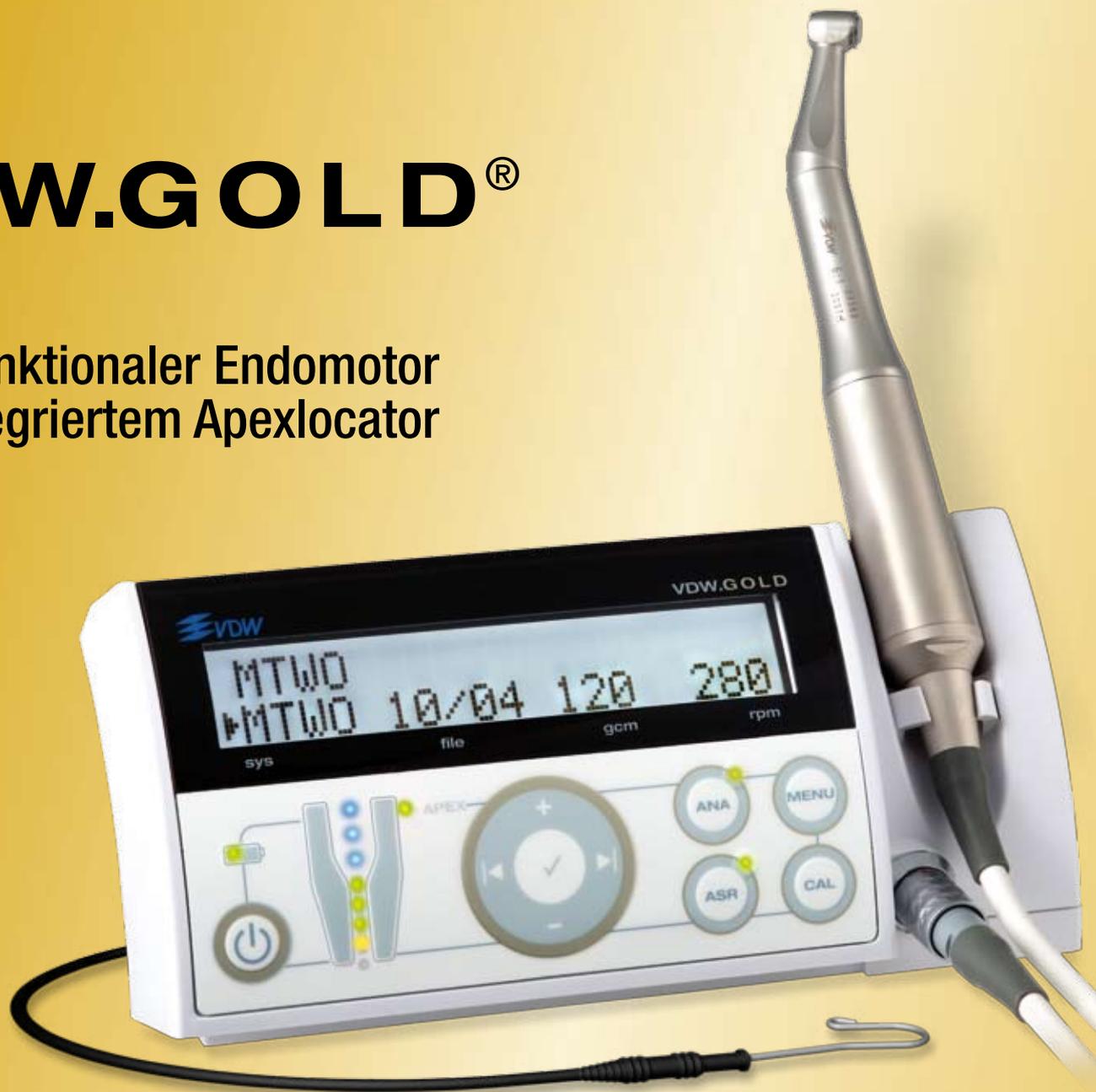

Vielseitig in Funktion und Anwendungsbereich

- Freie Wahl des Feilensystems
- Vorprogrammierte Drehmoment- und Drehzahlwerte für alle wichtigen NiTi-Systeme
- Größte Flexibilität durch einfaches Speichern individueller Drehmoment-/Drehzahlwerte
- Intelligente Steuerung mit automatischen Sicherheitsfunktionen
- Separate Längenbestimmung über Handfeile oder simultane Längenüberwachung während der Aufbereitung
- Bequemer Akkubetrieb, Behandlung auch während des Ladens möglich

→ Funktionelles Bedienfeld

- ANA** Sicherheitstaste für schwierige Anatomie
- ASR** Automatischer STOP und Rückwärtslauf bei hoher Belastung
- MENU** Einfache, durchdachte Menüstruktur
- CAL** Kalibrierfunktion bei Winkelstückwechsel



→ Integrierter Apexlocator

- Simultane Längenüberwachung während der Aufbereitung oder separater Einsatz des Apexlocators
- Zuschaltbarer Auto-STOP bei Erreichen des Apex
- Kontinuierliche Überwachung der Feilenposition auf der LED Anzeige
- Längenbestimmung ohne Röntgenstrahlung



→ Hochwertiges Winkelstück mit integriertem Messkontakt

- Kurzkopf für gute Sicht und Handlichkeit
- Ohne störenden Kontaktbügel
- Für schnellen Feilenwechsel



Lieferprogramm

- Ref. 1103 **VDW. GOLD®**
inklusive Winkelstück und Fußschalter
- Ref. 1079 **Zusätzliches Kurzkopf-Winkelstück 6:1**
- Ref. 1105 **VDW. GOLD® (Ref. 1103) + Mtwo® StarterKit**
Inhalt Mtwo® StarterKit:
Je 2 Mtwo® ISO 10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06
Je 1 Mtwo® ISO 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07
1 Mtwo® SystemBox
3 Plastik Übungsblöcke
2 x 3ml FileCare®EDTA
Anwender CD-ROM und Broschüre

- Ref. 1104 **VDW. GOLD® (Ref. 1103) + FlexMaster® StarterKit**
Inhalt FlexMaster® StarterKit:
Je 1 FlexMaster® BasicKit 21 und 25mm
1 FlexMaster® SystemBox
3 Plastik Übungsblöcke
2 x 3ml FileCare®EDTA
Anwender-Broschüre